

Microscopio tascabile PCE-PMS 50

Microscopio tascabile in formato di penna / Zoom : 50 ingrandimenti / Luce riflessa grazie all'illuminazione LED / Clip per attacco

Il microscopio tascabile dispone di 50 ingrandimenti. La messa a fuoco del microscopio tascabile si effettua ruotando il microscopio sulla punta acrilica svitabile. Con un diametro di solo 16 millimetri, sono possibili analisi e osservazioni laddove non arriva nessun altro tipo di microscopio. Grazie all'illuminazione LED del microscopio tascabile, l'area da analizzare può essere illuminata anche in ambienti oscuri.

Il microscopio tascabile è poco più grande di una penna e si può portare addosso in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, poiché è un dispositivo ideale per il controllo della qualità e per il tecnico di servizio sul campo. Il microscopio tascabile include un astuccio in cuoio dove può essere riposto quando non viene utilizzato.



- Astuccio in cuoio
- Design piccolo e compatto
- Clip di attacco

- 50 ingrandimenti
- Luce riflessa con illuminazione LED
- Non richiede ulteriore illuminazione

Specifiche tecniche

Zoom

Scala di misura

Ottica

Illuminazione

Alimentazione

Dimensioni

Peso

50 ingrandimenti

0,05 ... 2 mm


Monoculare

Luce riflessa con 2 LED

3 x Batterie LR927

120 x 35 x 16 mm

Circa 30 g

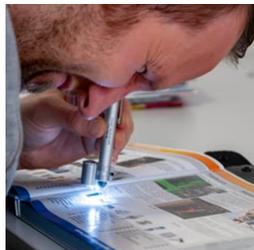

Contenuto della spedizione

- 1 x Microscopio tascabile PCE-PMS 50,
- 1 x Astuccio,
- 3 x Batterie LR927