

Termo-igrometro PCE-HT 300

Per la registrazione prolungata di temperatura, punto di rugiada e umidità relativa / Touch screen da 7" / Formato file CSV / Indicazione grafica / Batteria / USB

Il termo-igrometro PCE-HT 300 è un dispositivo da laboratorio per la registrazione della temperatura, del punto di rugiada e dell'umidità relativa. Il termo-igrometro salva i dati in una memoria interna da 16 GB, in formato CSV. I risultati possono essere letti tramite interfaccia micro-USB. L'ampio display touch screen da 7" del termo-igrometro dispone di due modalità di visualizzazione: modalità numerica con grafico a barre circolare e modalità grafica. La modalità grafica consente di visualizzare in modo semplice il corso della temperatura, del punto di rugiada e dell'umidità relativa. Il sensore del registratore di dati PCE-HT 300 si collega alla parte posteriore del dispositivo. È possibile comunque spostare il sensore grazie a un cavo da 2 m. Ciò consente l'utilizzo del termo-igrometro per il controllo di frigoriferi e camere climatiche. Il termo-igrometro PCE-HT 300 viene utilizzato facendo uso esclusivamente del display touch screen. Tutti i parametri vengono impostati facilmente. Oltre alla misura e alla registrazione dei dati, il dispositivo consente di generare un allarme quando vengono superati i valori limite alto e basso. Il termo-igrometro viene alimentato attraverso una batteria al litio. La batteria si carica mediante l'alimentatore da collegare all'interfaccia USB. È possibile collocare il termo-igrometro su un banco, facendo uso della base di appoggio, oppure montarlo sulla parete.




- Touch screen da 7"
- Memoria da 16 GB
- Registrazione in formato CSV

- Misura temperatura, punto di rugiada e umidità
- Interfaccia micro USB
- Alimentazione: batteria e rete elettrica

Specifiche tecniche

Parametro	Range di misura	Risoluzione	Precisione
Temperatura	-10 ... 80 °C	0,1 °C	±0,5 °C
Punto di rugiada	-10 ... 80 °C	0,1 °C	±0,5 °C
Umidità relativa	0 ... 100% U.R.	0,1% U.R.	<80% U.R.: ±2% >80% U.R.: ±2,5%
Display		Touch Screen 7"	
Memoria		16 Gb	
Formato di registrazione		CSV	
Alimentazione		Batteria: 3000 mAh al litio Alimentatore: 5V/2A	
Durata della batteria		Circa 5 anni	
Dimensioni		180 x 115 x 18 mm	
Peso		Circa 450 g	

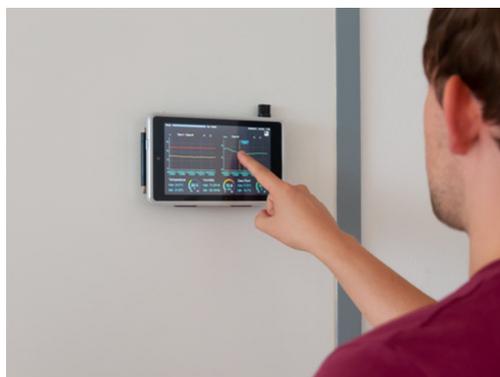

Contenuto della spedizione

- 1 x Termo-igrometro PCE-HT 300,
- 1 x Sensore,
- 1 x Cavo del sensore da 2 m,
- 1 x Supporto,
- 1 x Cavo USB,
- 1 x Alimentatore (5V/2A),
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)